


miniland

naturcalm




Español	4	Português	6	Deutsch	8	Polski	10
English	5	Français	7	Italiano	9	Русский	11

1 Figura • Figure • Abbildung
Zdjęcie • Рисунок

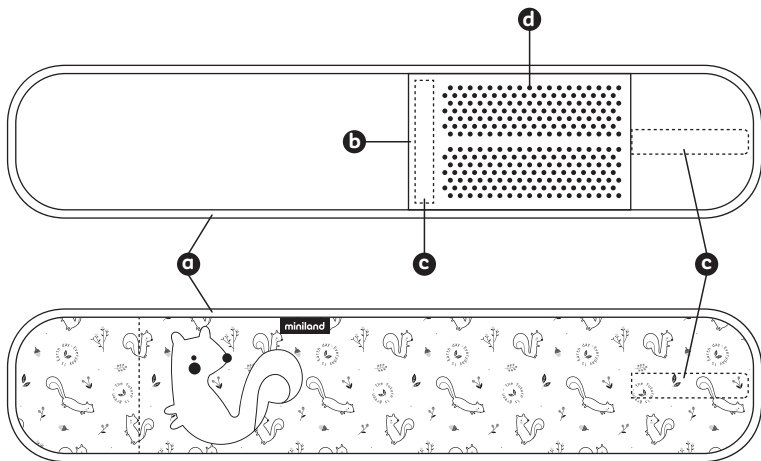

2 Figura • Figure • Abbildung
Zdjęcie • Рисунок

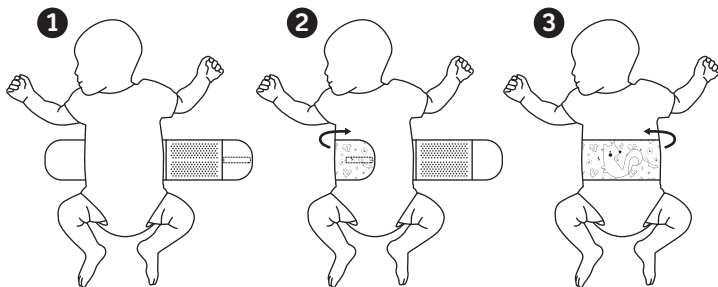

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. CONTENIDO
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
5. INSTRUCCIONES DE USO
6. MANTENIMIENTO

■ 1. INTRODUCCIÓN

Le damos la bienvenida a un nuevo producto de la línea **eco-friendly** de MINILAND, diseñada para papás que buscan productos funcionales y que, a su vez, supongan el mínimo impacto medioambiental posible, una tendencia para un ecosistema más sostenible. ¡Disfruta de una crianza más natural, fomentando una conducta consciente y ecologista!

Para más información sobre nuestra línea **eco-friendly** visite: minilandgroup.es

Naturalcalm es una faja de semillas con funda de diseño natural confeccionada en algodón 100% orgánico que alivia de forma natural y placentera las molestias causadas por los cólicos y gases de su bebé gracias al calor y a su relajante olor a lavanda. En su interior, encontrará una bolsita extraíble rellena de semillas naturales de mijo y lavanda que producen un agradable y relajante aroma con tan solo calentarla en el microondas.

■ 2. CONTENIDO

- 1 faja ergonómica
- 1 bolsita rellena de semillas de mijo y lavanda
- 1 manual de instrucciones

Si faltara alguno de estos elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

■ 3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea cuidadosamente estas instrucciones y guarde el manual en un lugar seguro, pues podría necesitar consultarlo en un futuro.
2. Lea las instrucciones de uso, no exponga las semillas a calor durante más tiempo del recomendado en este manual.
3. La bolsita de semillas debe usarse siempre dentro de la faja anticólicas, nunca aplicar la bolsita directamente sobre la piel.
4. Colocar siempre el cinturón de semillas por encima de alguna prenda de ropa, nunca directamente sobre la piel del bebé.

5. Se debe comprobar siempre la temperatura de la bolsita de semillas antes de usarla.
6. Nunca debe descoser la bolsita de semillas y sustituir las por unas nuevas.
7. Nunca moje la bolsa de semillas para su limpieza, puede afectar a la usabilidad del producto.

IMPORTANTE: No debemos dejar de consultar con nuestro médico las afecciones que pueda padecer nuestro bebé, y recurrir al fisioterapeuta para eliminar por completo los cólicos más persistentes.

3.1. EDAD RECOMENDADA

La edad recomendada de uso es de 0 meses a 2 años de edad.

■ 4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta faja de semillas con funda de diseño natural confeccionada en algodón 100% orgánico, proporciona un alivio inmediato de los cólicos de su bebé.

- a. Faja anticólicas
- b. Bolsillo
- c. Velcro
- d. Bolsita de semillas de mijo y lavanda

■ 5. INSTRUCCIONES DE USO

Extraiga la bolsita de semillas de mijo y lavanda (d), e introdúzcala en el microondas a 700 W durante 20 segundos cómo máximo. Antes de colocarla en el bolsillo de la faja (b), se debe comprobar que la temperatura es adecuada para el bebé.

Coloque la faja anticólico alrededor de la cintura del bebé, ciñéndola sin apretar y dejando holgura suficiente para que el bebé esté cómodo (figura 2). Deberá poner el bolsillo con las semillas naturales a la altura de la barriguita y el extremo con el velcro, debajo de la axila.

Transcurridos 10 minutos, quitar la faja al bebé.

■ 6. MANTENIMIENTO

Limpieza de la faja anticólicas (a)

Lavar a máquina máx.30°C.

Limpieza de la bolsita de semillas (d)

Limpier con un trapo húmedo la superficie, no sumergir en agua.

CONTENTS

1. INTRODUCTION
2. CONTENTS
3. SAFETY INSTRUCTIONS
4. PRODUCT DESCRIPTION
5. INSTRUCTIONS FOR USE
6. MAINTENANCE

■ 1. INTRODUCTION

Welcome to a new product from MINILAND's **eco-friendly** range, designed for parents who are looking for functional products that also have as little impact as possible on the environment, a trend for a more sustainable ecosystem. Enjoy more natural parenting, encouraging conscious, ecological behaviour!

For more information on our **eco-friendly** range, visit: minilandgroup.es

Naturcalm is a seed belt with a 100% organic cotton cover in a natural design that provides natural, pleasant relief from the discomfort caused by your baby's colic and gasses thanks to its warmth and its soothing lavender scent. Inside, you'll find a removable pouch filled with natural millet seeds and lavender that produce a pleasant, relaxing scent when simply heated in the microwave.

■ 2. CONTENTS

- 1 ergonomic belt
- 1 pouch filled with millet seeds and lavender
- 1 instruction manual

If any of these items are missing, contact your distributor.

■ 3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions carefully and keep the manual in a safe place, as you may need to check it again in the future.
2. Read the instructions for use and do not expose the seeds to heat for longer than recommended in this manual.
3. The seed pouch should always be used inside the anti-colic belt; never apply the pouch directly to the skin.
4. Always place the seed belt over the top of an article of clothing, never directly on the baby's skin.
5. The temperature of the seed pouch must always be checked before use.

6. You should never unstitch the seed pouch and refill it.
7. Never wet the seed pouch for cleaning, as this could affect the usability of the product.

IMPORTANT: Talk to your doctor about any conditions that your baby may have. See a physiotherapist to completely eliminate more persistent colic.

3.1. RECOMMENDED AGE

The recommended age of use is from 0 months to 2 years of age.

■ 4. PRODUCT DESCRIPTION

This seed belt with its 100% organic cotton cover in a natural design provides immediate relief from baby colic.

- a. Anti-colic belt
- b. Pocket
- c. Velcro
- d. Millet seed and lavender pouch

■ 5. INSTRUCTIONS FOR USE

Remove the millet seed and lavender pouch (d) and microwave it at 700 W for up to 20 seconds. Before placing it in the pocket of the belt (b), check that the temperature is suitable for your baby.

Place the anti-colic belt around the baby's waist, wrapping it loosely and leaving enough room to make sure the baby is comfortable (figure 2). The natural seed pouch should be placed at the height of the tummy and the end with the Velcro should be under the armpit.

After 10 minutes, remove the belt from the baby.

■ 6. MAINTENANCE**Cleaning the anti-colic belt (a)**

Machine wash max. 30°C.

Cleaning the seed pouch (d)

Wipe the surface with a damp cloth. Do not immerse in water.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. CONTEÚDO
3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
6. MANUTENÇÃO

■ 1. INTRODUÇÃO

Damos-lhe as boas-vindas a um novo produto da linha **eco-friendly** da MINILAND, desenhada para papás e mamãs que procuram produtos funcionais e que, por seu lado, representem o menor impacto ambiental possível, uma tendência para um ecossistema mais sustentável. Desfrute de uma criança mais natural, fomentando uma conduta consciente e ecologista!

Para mais informações sobre a nossa linha **eco-friendly** visite: minilandgroup.es

Naturalcalm é uma cinta de sementes com bolsa de desenho natural confeccionada em algodão 100% orgânico que alivia de forma natural e agradável os incómodos causados pelas cólicas e gases do seu bebé, graças ao calor e ao seu relaxante aroma a lavanda. No seu interior encontrará uma pequena bolsa extraível recheada de sementes naturais de painço e lavanda que produzem um aroma agradável e relaxante, bastando apenas aquecê-la no micro-ondas.

■ 2. CONTEÚDO

- 1 cinta ergonómica
- 1 bolsa recheada de sementes de painço e lavanda
- 1 manual de instruções

No caso de algum destes elementos estar em falta, entre em contacto com o seu distribuidor.

■ 3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia cuidadosamente estas instruções e guarde o manual num lugar seguro, pois poderá precisar de o consultar no futuro.
2. Leia as instruções de utilização, não exponha as sementes a calor durante mais tempo do que o recomendado neste manual.
3. A bolsa de sementes deve ser sempre usada dentro da cinta anticólicas. Nunca aplique a bolsa diretamente sobre a pele.
4. Coloque sempre o cinto de sementes sobre a parte superior de um artigo de vestuário, nunca

- directamente sobre a pele do bebé.
5. Deve comprovar-se sempre a temperatura da bolsa de sementes antes de a usar.
6. Nunca deve descobrir a bolsa de sementes e substituí-las por novas.
7. Não deve molhar a bolsa de sementes para limpeza, pois isso pode afetar a usabilidade do produto.

IMPORTANTE: Não devemos deixar de consultar o nosso médico sobre as afeções que o nosso bebé possa padecer, e devemos recorrer ao fisioterapeuta para eliminar por completo as cólicas mais persistentes.

3.1. IDADE RECOMENDADA

A idade recomendada de utilização é dos 0 meses aos 2 anos de idade.

■ 4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Esta cinta de sementes com bolsa de desenho natural confeccionada em algodão 100% orgânico proporciona um alívio imediato das cólicas do seu bebé.

- a. Cinta anticólicas
- b. Bolsa
- c. Velcro
- d. Bolsa de sementes de painço e lavanda

■ 5. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Extraia a bolsa de sementes de painço e lavanda (d) e introduza-a no micro-ondas a 700 W durante 20 segundos como máximo. Antes de a colocar no bolso da cinta (b), deve comprovar que a temperatura seja adequada para o seu bebé.

Coloque a cinta anticólicas em redor da cintura do bebé, cingindo-a sem apertar e deixando folga suficiente para que o bebé esteja cómodo (figura 2). Deverá colocar o bolso com as sementes à altura da barriga e a extremidade com o velcro, debaixo da axila.

Passados 10 minutos, retire a cinta ao bebé.

■ 6. MANUTENÇÃO

Limpeza da cinta anticólicas (a)

Lavar à máquina a um máx. 30°C.

Limpeza da bolsa de sementes (d)

Limpar a superfície com um pano húmido, não mergulhar em água.

INDEX

1. INTRODUCTION
2. CONTENU
3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
4. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
6. ENTRETIEN

■ 1. INTRODUCTION

Nous accueillons un nouveau produit dans la ligne **eco-friendly** de MINILAND, conçue pour les parents qui recherchent des produits fonctionnels ayant un impact environnemental le plus faible possible, une tendance pour un écosystème plus durable. Profitez d'une éducation plus naturelle, en encourageant un comportement conscient et écologique!

Pour plus d'informations sur notre ligne **eco-friendly**, rendez-vous sur: minilandgroup.es

Naturcalm est un coussin de graines au design naturel en coton 100 % biologique qui soulage naturellement et agréablement les inconforts causés par les coliques et les gaz de votre bébé grâce à la chaleur et au parfum relaxant de la lavande. À l'intérieur, vous trouverez une pochette amovible remplie de graines naturelles de millet et de lavande qui produisent un parfum agréable et relaxant rien qu'en le chauffant au micro-ondes.

■ 2. CONTENU

- 1 coussin ergonomique
- 1 pochette remplie de graines de millet et de lavande
- 1 manuel d'instructions

Si il manque l'un de ces éléments, veuillez contacter votre revendeur.

■ 3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement ces instructions et conservez le manuel dans un endroit sûr, car vous devrez peut-être vous y référer à l'avenir.
2. Lisez le mode d'emploi, n'exposez pas les graines à la chaleur plus longtemps que ce qui est recommandé dans ce manuel.
3. La pochette de graines doit toujours être utilisée à l'intérieur du coussin anti-coliques, ne jamais appliquer la pochette directement sur la peau.
4. Placez toujours la ceinture de graines sur le dessus d'un vêtement, jamais directement sur la peau du bébé.

5. Vérifiez toujours la température de la pochette de graines avant de l'utiliser.
6. Ne jamais vider la pochette de ses graines et les remplacer par de nouvelles.
7. Ne jamais mouiller la pochette de graines pour le nettoyage, cela peut affecter l'utilisation du produit.

IMPORTANT: Toujours consulter notre médecin au sujet d'éventuels problèmes de santé de notre bébé, et faire appel à un physiothérapeute pour éliminer complètement les coliques les plus persistantes.

3.1. ÂGE RECOMMANDÉ

L'âge d'utilisation recommandé est de 0 mois à 2 ans.

■ 4. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce coussin de graines au design naturel, fait de coton 100 % biologique, soulage immédiatement les coliques de votre bébé.

- a. Coussin anti-coliques
- b. Poche
- c. Velcro
- d. Pochette de graines de millet et de lavande

■ 5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirez la pochette de graines de millet et de lavande (d) et faites-la chauffer au micro-ondes à 700 W pendant 20 secondes maximum. Avant de la placer dans la poche du coussin (b), vérifiez que la température est adaptée au bébé.

Placez le coussin anti-coliques autour de la taille du bébé, sans trop serrer et en laissant suffisamment d'espace pour que le bébé soit à l'aise (figure 2). La poche contenant les graines naturelles doit être placée au niveau du ventre et l'extrémité avec le velcro, sous l'aisselle.

Au bout de 10 minutes, retirez le coussin.

■ 6. ENTRETIEN**Nettoyage du coussin anti-coliques (a)**

Lavage en machine à 30°C maximum.

Nettoyage de la pochette de graines (d)

Essuyez la surface avec un chiffon humide, ne l'immergez pas dans l'eau.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG
2. INHALT
3. SICHERHEITSHINWEISE
4. MERKMALE DES PRODUKTS
5. GEBRAUCHSANLEITUNG
6. PFLEGE

■ 1. EINLEITUNG

Dieses neue Produkt aus der **eco-friendly-Reihe** von MINILAND wurde eigens für Eltern entwickelt, die ebenso funktionale wie umweltfreundliche Produkte suchen, um somit ihren Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt zu leisten. Begleite dein Baby auf natürlichem Weg beim Aufwachsen und fördere ein nachhaltiges, umweltbewusstes Verhalten!

Mehr Information zu unserer Produktreihe **eco-friendly** findest du unter **minilandgroup.es**

Naturcalm ist ein Bauchband mit Hirse-Lavendel-Füllung und natürlich gestaltetem Bezug aus 100%-Bio-Baumwolle. Dank der Wärme und dem beruhigenden Lavendelduft hilfst du deinem Baby auf natürlichem und angenehmem Weg bei Blähungen und Koliken. Es enthält ein herausnehmbares Wärmekissen, das mit einer wohltuenden Mischung aus reiner Hirse und behaglich duftendem Lavendel gefüllt ist. In der Mikrowelle erwärmt, entwickelt es ein beruhigendes, entspannendes Aroma.

■ 2. INHALT

- 1 ergonomisches Bauchband
- 1 Wärmekissen mit Hirse-Lavendel-Füllung
- 1 Gebrauchsanleitung

Sollte eines dieser Bestandteile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

■ 3. SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
2. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung durch und halten Sie die dort enthaltenen Zeitangaben für die Erwärmung des Wärmekissens ein.
3. Das Wärmekissen darf nur innerhalb des Bauchbands verwendet werden. Es darf nie in direkten Hautkontakt kommen.
4. Legen Sie den Saatgurt immer über ein Kleidungsstück, niemals direkt auf die Haut des Babys.
5. Vor der Verwendung muss die Temperatur des

Wärmekissens immer überprüft werden.

6. Lösen Sie nie die Naht an dem Wärmekissen und ersetzen Sie die Füllung nie durch neue Samen.
7. Tauchen Sie das Wärmekissen zur Reinigung nie in Wasser. Es könnte die Brauchbarkeit des Produktes beeinträchtigen.

WICHTIG: Wenden Sie sich bei jeglicher Erkrankung Ihres Babys bitte immer an einen Arzt und lassen Sie ihr Baby bei anhaltenden Koliken immer von einem Physiotherapeuten behandeln.

3.1. EMPFOHLENES ALTER

Empfohlenes Alter: 0 bis 2 Jahre.

■ 4. MERKMALE DES PRODUKTS

Dieses natürlich gestaltete Bauchband mit herausnehmbarem Wärmekissen und Bezug aus 100%-Bio-Baumwolle hilft Ihrem Baby sofort bei Koliken und Blähungen.

- a. Anti-Kolik-Bauchband
- b. Innettasche
- c. Klettverschluss
- d. Wärmekissen mit Hirse-Lavendel-Füllung

■ 5. GEBRAUCHSANLEITUNG

Holen Sie das Wärmekissen mit Hirse-Lavendel-Füllung (d) heraus und erwärmen Sie es 20 Sekunden lang bei maximal 700 W in der Mikrowelle. Überprüfen Sie, ob die Temperatur für Babys geeignet ist, bevor Sie es wieder in die Innettasche des Bauchbands (b) einführen.

Legen Sie das Anti-Kolik-Bauchband um die Taille Ihres Babys, ohne es dabei zu fest anzuziehen. Lassen Sie genügend Zwischenraum, damit sich das Baby wohlfühlt (abbildung 2). Das Wärmekissen sollte auf der Höhe des Bäuchleins positioniert werden und das Ende mit dem Klettverschluss unterhalb der Achsel.

Nehmen Sie das Bauchband nach 10 Minuten Verwendung wieder ab.

■ 6. PFLEGE

Reinigung des Anti-Kolik-Bauchbands (a)

Bei max. 30°C in der Waschmaschine waschen.

Reinigung des Wärmekissens (d)

Reiben Sie die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Das Kissen darf nie in Wasser getaucht werden.

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. CONTENUTO
3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
5. ISTRUZIONI PER L'USO
6. MANUTENZIONE

■ 1. INTRODUZIONE

Siamo lieti di presentarti un nuovo prodotto della **eco-friendly** di MINILAND, una linea studiata per genitori alla ricerca di prodotti funzionali e che, inoltre, comportino il minore impatto ambientale possibile, tendenti a favorire un ecosistema più sostenibile. Favorisci un'educazione più naturale, promuovendo un comportamento consapevole ed ecologista!

Per maggiori informazioni sulla nostra linea **eco-friendly** visita: minilandgroup.es

Naturalcalm è una fascia con semi anticoliche dotata di fodera dal design naturale in cotone 100% organico che dà sollievo, in modo naturale e piacevole, ai disturbi causati dalle coliche e dai gas del neonato, grazie al calore e al suo rilassante aroma di lavanda. Al suo interno, troverai un sacchetto estraibile pieno di semi naturali di miglio e lavanda che generano un piacevole e rilassante aroma, semplicemente riscaldandolo nel microonde.

■ 2. CONTENUTO

- 1 fascia ergonomica
- 1 sacchetto con semi di miglio e lavanda.
- 1 manuale d'istruzioni

In caso di mancanza di qualsiasi tra questi elementi, mettersi in contatto con il proprio distributore.

■ 3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente queste istruzioni e conservare il manuale in un luogo sicuro, per eventuali future consultazioni.
2. Leggere le istruzioni per l'uso, non esporre i semi al calore per un tempo maggiore di quello indicato in questo manuale.
3. Il sacchetto dei semi deve essere usato sempre all'interno della fascia anticoliche, non deve mai essere applicato direttamente sulla pelle.
4. Posizionare sempre la cintura di semi sopra

un capo d'abbigliamento, mai direttamente sulla pelle del bambino.

5. Verificare sempre la temperatura del sacchetto dei semi prima di usarlo.
6. Non scuire mai il sacchetto dei semi e sostituirli con dei nuovi.
7. Per pulirlo, non bagnare il sacchetto dei semi, altrimenti l'usabilità del prodotto potrebbe essere compromessa.

IMPORTANTE: consultare il medico per conoscere le eventuali patologie del neonato, e rivolgersi al fitoterapeuta per eliminare completamente le coliche più persistenti.

3.1. ETÀ CONSIGLIATA

L'età consigliata di uso è da 0 mesi a 2 anni di età.

■ 4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questa fascia con semi dotata di fodera dal design naturale in cotone 100% organico, fornisce un sollievo immediato dalle coliche del neonato.

- a. Fascia anticoliche
- b. Sacchetto
- c. Velcro
- d. Sacchetto di semi di miglio e lavanda

■ 5. ISTRUZIONI PER L'USO

Estrarre il sacchetto dei semi di miglio e lavanda (d), e inserirlo nel microonde a 700 W per un massimo di 20 secondi. Prima di inserire il sacchetto nella fascia (b), verificare che la temperatura sia quella idonea per il neonato.

Disporre la fascia anticoliche intorno ai fianchi del neonato, cingendola senza stringere e lasciando lo spazio sufficiente affinché il neonato sia comodo (figura 2). Mettere il sacchetto con i semi naturali all'altezza del pancino e, l'estremità con il velcro, sotto l'ascella.

Trascorsi 10 minuti, togliere la fascia al neonato.

■ 6. MANUTENZIONE**Pulizia della fascia anticoliche (a)**

Lavare in lavatrice max. 30°C.

Pulizia del sacchetto dei semi (d)

Pulire con un panno umido la superficie, non immergere in acqua.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE
2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
3. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
4. WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
5. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
6. UTRZYMANIE

■ 1. WPROWADZENIE

Powitajmy nowy produkt MINILAND z linii **przyjaznej dla środowiska**, stworzonej z myślą o rodzicach poszukujących wyrobów funkcjonalnych, ale o minimalnym wpływie na środowisko. Jest to tendencja, której celem jest utrzymanie zrównoważonego ekosystemu. Dzięki niej dzieci wychowują się w zgodzie z naturą, ucząc się świadomych i ekologicznych zachowań.

Więcej informacji na temat naszej linii **przyjaznej dla środowiska** znajdziesz na stronie: minilandgroup.es

Naturalm to wypełniony ziarnem pas z powłoczką o prostym wzorze, wykonaną ze stuprocentowej bawełny organicznej. Za pomocą ciepła i odprężającego zapachu lawendy w naturalny i przyjemny sposób łagodzi dolegliwości związane z kolką i gazami jelitowymi u niemowląt. W jego wnętrzu znajduje się wyjmowana torebka wypełniona prawdziwym ziarnem prosa i lawendą, które po delikatnym podgrzaniu w kuchence mikrofalowej wydzielają przyjemny, odprężający aromat.

■ 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 ergonomiczny pas
- 1 torebka wypełniona ziarnem prosa i lawendą
- 1 instrukcja użytkowania

W razie braku któregokolwiek z tych elementów prosimy o kontakt z dystrybutorem.

■ 3. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do ewentualnych przyszłych konsultacji.
2. Prosimy o przeczytanie instrukcji użytkowania i nienarządzanie ziarna na działanie ciepła przez czas dłuższy od zalecanego.
3. Torebka z ziarnem może być używana wyłącznie po jej umieszczeniu w pasie antykolkowym. Zabrania się bezpośredniego kontaktu torebki ze skórą.
4. Opaskę z nasionami zawsze umieszczaj na

- ubrani, nigdy bezpośrednio na skórze dziecka.
5. Sprawdź temperaturę torebki z ziarnem przed każdym użyciem.
6. Zabrania się rozpruwania torebki i wymiany ziaren na nowe.
7. Zabrania się moczenia torebki z ziarnem w celu czyszczenia – może to mieć niepożądany wpływ na użyteczność produktu.

WAŻNE: Nie należy rezygnować z konsultacji medycznych w zakresie dolegliwości dziecka ani zająć z fizjoterapeutą mających na celu całkowitą eliminację uporczywej kolki.

3.1. ZALECANY WIEK UŻYTKOWNIKA

Pas zalecany jest dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat.

■ 4. WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Pas z ziarnem w powłoczce ze stuprocentowej bawełny organicznej z prostym wzorem w natychmiastowy sposób łagodzi kolkę u niemowlęcia.

- a. Pas antykolkowy
- b. Kieszonka
- c. Rzep
- d. Torebka wypełniona ziarnem prosa i lawendą

■ 5. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Torebkę z ziarnem prosa i lawendą (d) wyjąć z pasa i umieścić w kuchence mikrofalowej nastawionej na maksymalnie 20 sekund z mocą 700 W. Przed ponownym włożeniem torebki do kieszonki pasa (b) sprawdzić, czy temperatura torebki jest odpowiednia dla niemowlęcia.

Poprowadzić pas antykolkowy wokół pasa niemowlęcia, dopasowując go do jego ciała bez dociskania i pozostawiając wystarczająco dużo przestrzeni, aby zapewnić dziecku wygodę (rysunek 2). Kieszonka z ziarnem powinna znajdować się na wysokości brzuszka niemowlęcia, zaś zapięcie na rzep pod pachą.

Zdjąć dziecku pas po 10 minutach.

■ 6. UTRZYMANIE

Czyszczenie pasa antykolkowego (a)
Prać w pralce maksymalnie w temperaturze 30°C.
Czyszczenie torebki z ziarnami (d)
Powierzchnię oczyścić wilgotną szmatką. Nie zanurzać w wodzie.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

■ 1. ВВЕДЕНИЕ

Мы рады представить вам новый продукт **эко-дружественной** линии компании MINILAND, разработанной для родителей, ищущих, следуя тенденции рационального использования и сохранения природного окружения, функциональные товары с наименьшим негативным воздействием на окружающую среду. Наслаждайтесь, выращивая ребенка в наиболее натуральных условиях, способствуя формированию у него осознанного, бережного отношения к окружающему миру!

Чтобы узнать больше о нашей линии **эко-дружественной** продукции, посетите сайт: minilandgroup.es

Naturcalm — пояс с наполнителем из семян, выполненный в мягких тонах с природными мотивами, изготовлен из 100% органического хлопка, помогает естественным образом облегчить состояние вашего малыша и уменьшить болевые ощущения, вызванные коликами и газами, благодаря его сочетанию приятного тепла и расслабляющего аромата лаванды. Внутри пояса находится текстильный вынимающийся мешочек, наполненный семенами натурального проса и лепестками лаванды, которые издают приятный расслабляющий аромат после его подогрева в микроволновой печи.

■ 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 эргономичный пояс
- 1 мешочек с семенами проса и лепестками лаванды
- 1 руководство по эксплуатации

Если в комплекте поставки отсутствуют какие-либо из вышеуказанных элементов, обратитесь к вашему распространителю.

■ 3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите эти инструкции и сохраните настоящее руководство в надежном месте для будущего использования.
2. Прочтите инструкции по эксплуатации, не подвергайте семена воздействию тепла дольше, чем это рекомендовано в настоящем руководстве.
3. Мешочек с семенами следует всегда использовать внутри пояса от колик, никогда не прикладывайте его непосредственно к коже ребенка.

4. Всегда кладите полоску для семян поверх одежды, никогда непосредственно на кожу ребенка.
5. Перед использованием пояса всегда проверяйте температуру мешочка с наполнителем.
6. Никогда не открывайте мешочек с наполнителем и не заменяйте имеющиеся в нем семена на новые.
7. Ни в коем случае не мочите мешочек с семенами, не используйте воду или иные жидкости для его чистки, это может повлиять на функциональность изделия.

ВАЖНО: При наличии у малыша болезненных симптомов обязательно обратитесь к вашему педиатру или воспользуйтесь услугами физиотерапевта, чтобы полностью устранить самые стойкие проявления колики.

3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендуется использование в возрасте от 0 месяцев до 2 лет.

■ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

пояс с наполнителем из семян, выполненный в мягких тонах с природными мотивами, изготовлен из 100% органического хлопка, помогает естественным путем немедленно облегчить младенческие колики.

- a. Пояс от колики
- b. Карман
- c. Застежка-липучка
- d. Мешочек с семенами проса и лепестками лаванды

■ 5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выньте из пояса мешочек с семенами проса и лавандой (d), поместите его в микроволновую печь максимум на 20 секунд при мощности 700 Вт. Перед тем как вставить мешочек внутрь пояса (b), убедитесь в том, что его температура является комфортной для ребенка.

Оберните пояс от колики вокруг талии ребенка, не затягивая его, чтобы он свободно прилегал к телу, не стесняя свободу движений малыша (рисунок 2). Поместите кармашек с наполнителем из семян на уровне живота, а конец пояса с застежкой-липучкой - в районе подмышки.

По истечении 10 минут снимите пояс с малыша.

■ 6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Чистка пояса от колики (a)

Стирать в стиральной машине при максимальной температуре 30°C.

Чистка мешочка с семенами (d)

Протирать поверхность влажной тряпочкой, не погружать в воду.

miniland

Miniland S.A. P.Ind. La Marjal I C/ La Patronal 10
03430 ONIL (Alicante) SPAIN
📞 Technical support: +34 966 557 775
Fax +34 965 565 454
www.minilandgroup.com · tecnico@miniland.es

© Miniland, S.A. 2020

Fabricado en China. Conservar los datos.
Made in China. Keep this information.
Fabricado em China. Conservar dados.
Fabbricato in Cina. Conservare i dati.
Fabriqué en Chine. Conserver ces informations.
Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf
Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcję.
Сделано в Китае. Сохраните эту информацию.
صنع في الصين. احتفظ بهذه المعلومات.

naturcalm 89396